

Soudeuses rotatives série PS

sécurité dans l'emballage



Steelco
your partner in infection control



“For the Environmentally conscious”



Soudeuses rotatives serie PS

La série de soudeuses rotatives Steelco et ses accessoires assurent l'intégrité aseptique de chaque enveloppe à usage unique, que l'on peut sceller, y compris le modèle Tyvek. Elles offrent toujours une étanchéité parfaite.

Les modèles disposent de procédés validés selon la norme ISO 11607-2 et la nouvelle guide ISO/TS 16775 avec monitoring de la température, de la pression de contact et de la vitesse de glissement pour réaliser un scellage optimal, résistant, mais facile à détacher.



Les soudeuses rotatives Steelco série PS sont réalisées en acier INOX robuste avec surfaces plates pour en faciliter le nettoyage.

La gamme entière est dotée de fonctionnalités d'économie d'énergie avec stand-by automatique et système automatique de mise en marche.

Des versions dotées d'imprimantes intégrées, qui règlent la

dimension du caractère en automatique selon la longueur de l'enveloppe, sont disponibles.

Quelques modèles peuvent être connectés aux systèmes de traçabilité ou à des imprimantes externes.

Soudeuse PS 300

cod. 99911311



Imprimante intégrée à réglage automatique de la dimension du caractère. Scellage réglable pour température, vitesse (jusqu'à 13m à la minute) et pression.

Ce modèle dispose aussi de compteur des pièces scellées.

Stand-by automatique et départ rapide pour réduire au minimum la consommation d'énergie, en maximisant le résultat final.



Fonctions et programmes gérés par un panneau intuitif touch screen (écran tactile) à couleurs, ou par scanner pour codes à barres ou par connexion à un ordinateur externe.



Douée de connexions RS232, USB et Ethernet



Entretien facile, grâce à l'ouverture de la porte sur le front du dispositif.



Soudeuse PS 200

cod. 99911309



Imprimante intégrée à réglage automatique de la dimension du caractère.

Fonctions et programmes gérés par touches à effleurement ou par scanner pour codes à barres ou par ordinateur externe. Connexion RS232.

Contrôle de la température, de la vitesse et de la pression du scellage, selon la norme ISO 11607-2.

Stand-by automatique et départ rapide pour réduire au minimum la consommation d'énergie.



Soudeuse PS 100

cod. 99911320



Fonctionnement et programmation par touches à effleurement.

Contrôle de la température, de la vitesse et de la pression du scellage, selon la norme ISO 11607-2.

Stand-by automatique et départ rapide pour réduire au minimum la consommation d'énergie, en maximisant le résultat final.



Accessoires


Une série d'accessoires, comme un porte-rouleaux avec coupeuse pour la coupe des enveloppes (avec un ou deux étagères), le rouleau ou le plateau pour le glissement, est disponible.

Ces accessoires peuvent être insérés dans une table de travail pour fournir un flux efficace aux opérateurs et une position ergonomique optimale.

Coupeuse PS

Porte-rouleaux avec coupeuse pour enveloppes de dimensions différentes. Disponible aussi sur deux niveaux.

cod. 99911314
cod. 99911322

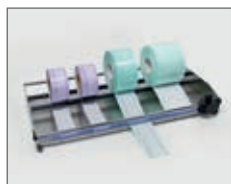

Lecteur de code à barres et logiciel

Connectable à PS 300 et PS 200, il identifie rapidement, d'une liste de codes, les informations spécifiques d'emballage.

cod. 99911320



Test d'encre PS

Test à l'encre simple et efficace, pour vérifier l'intégrité d'étanchéité du sachet (norme ISO 11607-2). Emballage de 30 pièces.

cod. 99911332



Rouleau PS

Compatible avec toutes les soudeuses Steelco.

cod. 99911312



Imprimante de code à barres PS

Elle imprime des étiquettes avec identification du lot, date de stérilisation, type et expiration.

cod. 99911321



Plateau PS

Compatible avec toutes les soudeuses Steelco.

cod. 99911310



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SOUDEUSES ROTATIVES STEELCO SÉRIE PS

CARACTÉRISTIQUES	Steelco PS 300	Steelco PS 200	Steelco PS 100
Caractéristiques du scellage			
Distance scellage du bord de l'enveloppe	0-35mm	0-35mm	0-35mm
Largeur du scellage (jusqu'à 19mm sur demande)	12mm	12mm	12mm
Vitesse de passage	5-13m par minute	10m par minute	10m par minute
Distance du bord de l'instrument mis sous enveloppe	> 30mm	> 30mm	> 30mm
Puissance	400 W	390W	390W
Enveloppes que l'on peut sceller et bobines	*	*	*
Approuvé pour Tyvek®, tissu non tissé, SMS et autres EN ISO 11607-1	*	*	*
Glissement inverse en cas de bloc	*	*	*
Température de scellage	max 200° C	max 200° C	max 200° C
2°C de tolérance de réglage de la température avec protection à la surchauffe	*	*	*
Pression de contact	70-130N	100N	100N
Compte-pièces	*	*	
Impression	*	*	
Date et heure de la mise sous enveloppe, expiration, lot, opérateur et dispositif	*	*	
Réglage automatique de la dimension du caractère selon les largeurs des enveloppes	*	*	
Rotation image d'impression et impression du code à barres	*	*	
Impression des paramètres épreuve d'étanchéité	*	*	
Connexions			
RS 232	*	*	
USB	*	Option	
Ethernet	*		
PC configurable avec fonction de système de secours (backup)	*	*	
Connexion externe avec imprimante d'étiquettes	*		
Compatible avec le système de traçabilité SteelcoData	*	*	
Compatibilité avec lecteur de code à barres	*	*	
Normes et alimentation			
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Conformité à la norme ISO 11607-2, DIN 58953-7	*	*	*
Procédé qu'on peut valider selon la norme ISO 11607-2	*	*	*
Écran température, pression et vitesse	*	*	(seulement température et pression)
Arrêt automatique et système automatique de mise en marche	*	*	*
Tension de réseau	100-240 V	110/115/230 V	110/115/230 V
Fréquence de réseau	50/60 hz	50/60 hz	50/60 hz
Appel des paramètres et date, après coupure du courant électrique	*	*	*
Poids	21Kg	15Kg	12Kg
Dimensions largeur x profondeur X hauteur en mm	710 x 260 x 240	560 x 255 x 145	510 x 225 x 145

Tyvek® est une marque enregistrée d'E.I du Pont de Nemours



STEELCO S.p.A.

Via Balegante, 27
31039 Riese Pio X (TV) - Italy
Ph. +39 0423 7561
Fax +39 0423 755528
steelco@steelcospa.com
www.steelcospa.com

Filiali

STEELCO HUNGARY

Temesvár u., 19-21
1116 Budapest - Hungary
Ph. +36 1 371 0257
Fax +36 1 371 0258
steelco@t-online.hu

STEELCO USA

999 Stinson Way - Unit 307
West Palm Beach, FL 33411 USA
Ph. +1 561 791 8313
Fax +1 561 791 8213
steelco-usa@steelcospa.com

STEELCO ASIA

6th floor, Suite 16, IOI Business Park
Persiaran Puchong Jaya Selatan - Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong, Selangor - Malaysia
Ph +60 3 8064 4339 (Ext. 112) - Fax: +60 3 8064 4340
steelco-asia@steelcospa.com



Les produits et les caractéristiques techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Pour tout renseignement mis à jour, il faut s'adresser à son revendeur Steelco.

DC-PP-02-PS range RR Rev00